

Ansca+e LeniScar Silicone Stick provides an easy-to-use topical scar treatment. It is intended to diminish hypertrophic scars and keloids characterized with a raised or discolored appearance. LeniScar is an advanced silicone formula which contains medical grade silicone and antioxidant vitamin C & E. It creates a water-proof, transparent thin film which helps to maintain the moisture balance of skin and provides an optimal protective barrier for the scar to restore.

Product Name

Ansca+e LeniScar Silicone Stick

Intended user Lay person/Medical professional person

Indications Prevention of hypertrophic scars and keloids resulting from surgery

injury, C-section, burns, cuts, scrapes, acne, insect bites, etc.

Ingredients Poly(dimethylsiloxane), Silicone elastomer, Petroleum wax, Ascorbyl

tetra 2-hexyldecanoate, Tocopherol acetate.

Directions

1. Ensure scar area is clean and dry before each application.
2. Apply LeniScar Silicone Stick over the entire scar toward the same direction.
3. Repeat 2-3 times daily for consecutive 8-12 weeks or until scar stops responding.
4. To remove, simply wash with a mild soap or neutral cleanser.

Precautions


1. For external use only.
2. Do not use on open wounds or unhealed skin.
3. Avoid contact with eyes and mucous membranes.
4. If irritation or allergic reaction occurs, discontinue use and consult your physician.

Tips


SP-200-1 (9.2g) ----- SP-200-2 (4.0g) -----



Large Scar

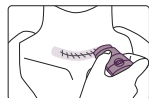

Surgery Injury

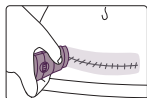


C-section



Minor Scar

Storage Store at 15-35°C and avoid from direct sunlight, heat and moisture.

Adverse Incident Reporting Please report to BenQ Materials Corporation, our Authorized Representative, and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established if any serious incident that has occurred in relation to the device.

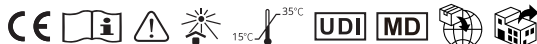

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengua n.º 18, CP 29006, Málaga, Spain.
info@cmcmmedicaldevices.com

BenQ Materials Corporation

29 Jianguo E. Road, Gueishan 33341, Taoyuan Taiwan, R.O.C.
TEL.: +886-3-3748800
www.BenQMaterials.com
Made in Taiwan

Version : 02/ 44.05940.040
Issue Date : 2023.03.16

La barra de silicona Ansca+e LeniScar proporciona un tratamiento tópico fácil de usar para las cicatrices. Está indicada para reducir las cicatrices y los queloides hipertróficos caracterizados por un aspecto elevado o decolorado. LeniScar es una fórmula avanzada de silicona que contiene silicona de calidad médica y vitaminas antioxidantes C y E. Crea un película delgada impermeable y transparente que ayuda a mantener el equilibrio de humedad de la piel y proporciona una barrera protectora óptima para la restauración de la cicatriz.

Nombre del producto Barra de silicona Ansca+e LeniScar

Usuario previsto Tanto profesionales médicos como personas no profesionales

Indicaciones Prevención de cicatrices y queloides hipertróficos producidos por lesiones de

cirugía, cesáreas, quemaduras, cortes, arañazos, acné, picaduras de insectos, etc.

Componentes Polidimetilsiloxano, elastómero de silicona, cera de petróleo, tetra

2-hexildecanoato de ascorbilo y acetato de tocoferol.

Modo de empleo

1. Comprobar que el área está limpia y seca antes de cada aplicación.
2. Aplicar la barra de silicona LeniScar sobre toda la cicatriz en la misma dirección.
3. Repetir dos o tres veces al día durante ocho a doce semanas seguidas o hasta que la cicatriz deje de responder.
4. Para eliminarla basta con lavar con un jabón suave o un limpiador neutro.

Precauciones


1. Solo para uso externo.
2. No utilizar en heridas abiertas o piel no cicatrizada.
3. Evitar el contacto con los ojos y las mucosas.
4. Si se produce una irritación o reacción alérgica, interrumpir la aplicación y consultar al médico.

Sugerencias


SP-200-1 (9.2g) ----- SP-200-2 (4.0g) -----




Cicatriz grande

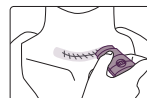

Incisión quirúrgica

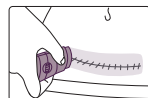


Cesárea

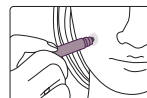

Cicatriz pequeña

Almacenamiento Guardar a 15 - 35 °C protegida de la luz solar directa, el calor y la humedad.

Información de incidentes adversos Informar a BenQ Materials Corporation, a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario o el paciente si se produce algún incidente grave relacionado con el producto.

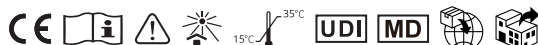

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengua n.º 18, CP 29006, Málaga, España.
info@cmcmmedicaldevices.com

BenQ Materials Corporation

29 Jianguo E. Road, Gueishan, Taoyuan, Taiwán, R.d.C.
TEL.: +886-3-3748800
www.BenQMaterials.com
Fabricado en Taiwán

Version : 03 / 44.05940.040
Fecha de publicación: 2023-06-27